

PACKAGING



PACK INDIVIDUEL

- 1 Practi-Man Basic
- 1 manuel d'utilisation
- 5 poumons
- 2 valves
- 1 sac de transport avec coussinet



MULTI PACK

- 4 Practi-Man Basic
- 1 manuel d'utilisation
- 20 poumons
- 8 valves
- 1 sac de transport pour 4 unités

CERTIFICAT DE GARANTIE



Ce produit a été soumis aux plus stricts contrôles de qualité avant de sortir d'usine. Toutefois, en cas de problème de fonctionnement dû au montage et/ou à des pièces d'origine défectueuses, merci de lire les conditions de garantie et de vous mettre en contact avec votre distributeur local.

À travers ce certificat de garantie, VICEDO MARTI, S.L. garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ni de fabrication lors de l'achat, et ce pendant une période de DEUX ANS à compter de la livraison.

Si au cours de la période couverte par la garantie le produit présente un défaut quelconque provenant de la fabrication ou des matériaux, le consommateur devra en informer son distributeur local dans un délai maximum de dix jours à compter de la constatation du défaut, laissant au distributeur le choix/la décision de réparer ou de remplacer la pièce endommagée.

CONDITIONS DE GARANTIE:

Informations et documentation: la garantie est uniquement valable en présentant le ticket ou la facture d'achat du produit et le bon de livraison, à condition que la date de livraison soit postérieure à la date d'achat, et en indiquant expressément les informations suivantes : nom complet et adresse de l'acheteur.

Exclusions: cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

- Dommages et/ou dysfonctionnements du produit provenant d'une utilisation inappropriée, de chutes, d'une tromperie ou d'une négligence de la part de l'utilisateur, comprenant une utilisation du produit à des fins différentes de celles prévues.
- Dommages et/ou dysfonctionnements provenant d'agents externes comme le calcaire ou autres produits nocifs, chimiques, obstructifs ou corrosifs.
- Dommages et/ou dysfonctionnements provenant d'un entretien inapproprié ou d'un manque d'entretien.
- Dommages et/ou dysfonctionnements provenant de l'utilisation de pièces de rechange d'autres marques.

Zone géographique: la garantie s'applique à tous les pays dans lesquels le produit est distribué par VICEDO MARTI, S.L. ou par un distributeur officiel d'VICEDO MARTI, S.L.

Annulation de garantie: la garantie du produit sera annulée dans les cas suivants :

- Dommages provoqués par des réparations réalisées par un personnel étranger au service technique autorisé par VICEDO MARTI, S.L., ainsi qu'en cas de remplacement ou d'utilisation de pièces supplémentaires ou d'accessoires non originaux.
- Manipulation des informations contenues dans la facture, le ticket d'achat ou le bon de livraison.

VICEDO MARTÍ S.L.


C/ Ávila, 2 - 03440 Ibi - SPAIN

TEL. +34 965 554 708 www.practiman.com - international@practiman.com




CPR MANIKIN PRACTI-MAN BASIC

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS PRINCIPALES

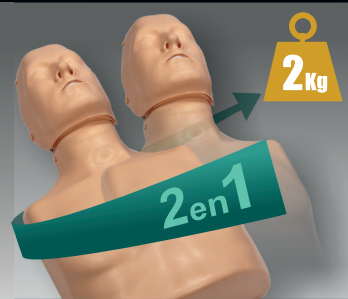

➤ SIMULATEUR 2 EN 1

Pour la formation RCP adulte et RCP enfant avec un seul mannequin.

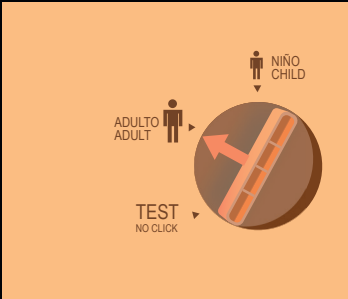


➤ SÉLECTEUR EXCLUSIF 3 POSITIONS

Adulte, enfant et test (no click).




➤ RESPIRATION RÉELLE

Système respiratoire exclusif comprenant un nez avec une fonction réelle.

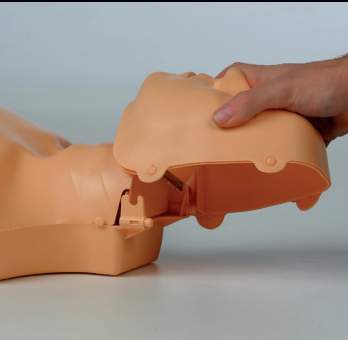

➤ ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

Le mannequin se compose de 4 parties: la tête, le poumon, la valve et le torse qui peuvent être assemblés en quelques secondes.

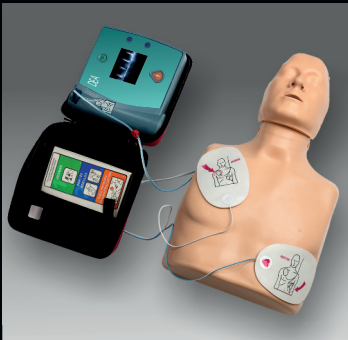

➤ FORMATION DAE

Les électrodes ne laissent pas de résidus sur la peau.



➤ HYGIÈNE MAXIMALE

Pour minimiser les risques possibles de contagion pendant la formation RCP.

PRACTI-MAN
CPR TRAINING SOLUTIONS
by Vicedo Marti

MONTAGE DE PRACTI-MAN BASIC




Retirer la peau du torse.



Unir le bec d'entrée avec la valve.




Le poulmon doit toujours se trouver en dessous de la tige métallique.

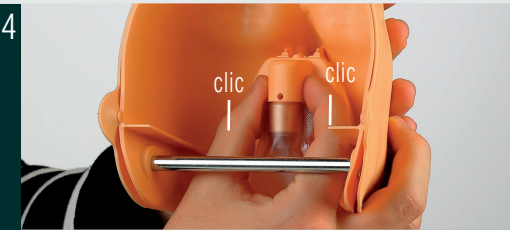

Clipser la partie supérieure du bec d'entrée sur la tête à l'aide d'une pression jusqu'à entendre le clic.



Assembler la tête et le torse en insérant la tige métallique dans les ouvertures prévues situées de chaque côté du cou.

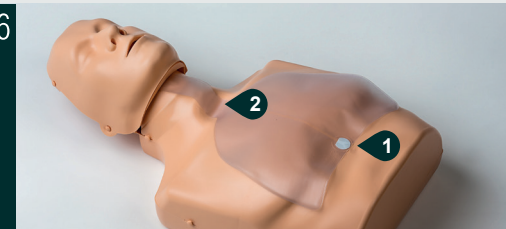

Placer le poulmon sur le torse et vérifier:
1. Que l'autocollant est fixé sur la marque circulaire.
2. Que le poulmon repose sur le cou.




Placer la peau du torse.

PIÈCES DU PRACTI-MAN BASIC



POUMON
(Ref. SP-001)

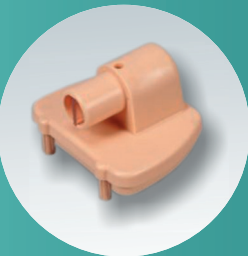

VALVE
(Ref. SP-002)



PEAU DU VISAGE
(Ref. Face-MB)



PEAU DU TORSO
(Ref. Chest-MB)

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION


Pour garantir une hygiène optimale, le fabricant recommande de nettoyer le Practi-Man Basic après chaque utilisation, en suivant les instructions suivantes:



Pour nettoyer le mannequin, il est nécessaire de désinfecter les lèvres et le visage, en séparant la peau du visage de la tête après chaque exercice réalisé par l'élève.



Pour une désinfection plus complète, plonger la peau du visage dans un récipient contenant du produit désinfectant, nettoyer soigneusement et maintenir au sec pour une utilisation correcte.

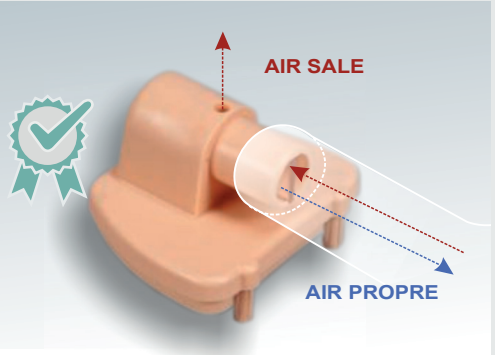

Après chaque utilisation, il est nécessaire de désinfecter et de laisser sécher la valve de Practi-Man Basic, pour garantir un fonctionnement correct.



Le poulmon de Practi-Man Basic est semi-jetable et peut être utilisé pour réaliser une séance d'entraînement avec un groupe de plusieurs personnes, sans avoir besoin de le changer. Si la poitrine ne se soulève plus pendant l'exercice, vérifier que le poulmon n'est pas humide. Si c'est le cas, le remplacer par un neuf.

PROTECTION PENDANT LA FORMATION RCP



La protection pendant la formation est complétée par l'utilisation de masques protecteurs pour la ventilation.



Boîte distributrice de 100 unités
Pour garantir le bon nettoyage du mannequin, utiliser les lingettes désinfectantes.