



DÉBITMÈTRE MÉDICAL **MEDIFLOW®+**

EDITION 1/2014

MediFlow® est un sélecteur de débits destiné au contrôle et à la mesure du débit d'air médical ou d'oxygène administré au patient.

- Mécanisme innovant d'auto-sélection du débit associé à une technologie exclusive de débit continu entre deux valeurs.
- Débitmètre conçu pour continuer à fonctionner même en cas de destruction accidentelle du volant de réglage;
- Echelle des débits orientée à 45° pour une lecture à la fois frontale et latérale;
- Sortie rotative à 360° afin d'optimiser l'orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient;
- Un large choix d'échelles de débits :
0 à 2 l/min, 0 à 6 l/min, 0 à 15 l/min et 0 à 25 l/min;
- Disponible avec 9 ou 11 valeurs de débits suivant les modèles, élargissant ainsi, le champ d'applications thérapeutiques.



MEDIFLOW®+

DÉBITMÈTRE MEDIFLOW® RACCORDÉ À UNE PRISE MURALE D'UN RÉSEAU D'OXYGÈNE HOSPITALIER



Le débit est réglé au moyen d'un volant à ailettes facile de manipulation.

La nouvelle technologie de contrôle des débits prévoit une sécurité essentielle pour le patient: l'assurance de recevoir le débit de gaz en toutes positions et ce, même en cas de positionnement erroné du sélecteur entre deux valeurs de débit.


Quatre types d'échelles de débit permettent de couvrir l'ensemble des besoins thérapeutiques en oxygène ou air médical.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz :	oxygène, air médical
Plage de pressions d'entrée :	de 4 à 5 bar
Plages des débits :	
0 à 2 l/min	0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2
0 à 6 l/min	0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6
0 à 15 l/min	0-0,5-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15
0 à 25 l/min	0-0,5-1-2-3-4-6-8-10-12-15-25
Raccord d'entrée :	Embout verrouillable NF, (autres normes sur demande)
Raccord de sortie :	M 12x1.25 (autres sur demande) et olive livrée de série
Matériau du corps :	Laiton nickelé
Volant de réglage :	Polyamide
Joints :	EPDM
Dimensions :	Diamètre 45 mm
	Longueur 95 mm
	Poids 350 g

LES AVANTAGES DU MEDIFLOW®

Garantie de la présence d'un débit sur un positionnement intermédiaire

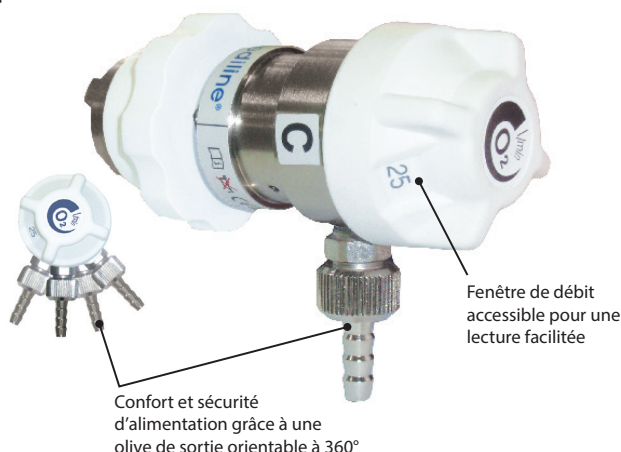

Référence	Désignation	Gaz	Débit (l/min)
0727016	Mediflow®	O ₂	0-2
0727017	Mediflow®	O ₂	0-6
0727018	Mediflow®	O ₂	0-15
0727019	Mediflow®	O ₂	0-25
0727020	Mediflow®	AIR	0-6
0727021	Mediflow®	AIR	0-25
0727034	Mediflow®	AIR	0-2

ACCESSOIRES

Référence	Désignation
K303154	Sélecteur de sortie débitmètre (sortie humidificateur/tubulure)
9454150	Pochette de 10 olives de sortie 4 cran NF (M12x1,25) + joint d'étanchéité
9427650	Pochette de 10 joints d'étanchéité pour olive NF (M12x1,25)
9404780	Adaptateur en métal pour raccorder un humidificateur 9/16'
K291645	Lot de 10 adaptateurs en polypropylène pour humidificateurs 9/16'



GCE S.A.S
B.P 40110 - 70, rue du Puits Charles
La Charité sur Loire Cedex, F-58403, FRANCE
Tel. +33 386 69 46 00, Fax. + 33 3 86 70 09 81
E-mail: sales.fr@gcegroup.com
www.gcegroup.com

